


Stretching
Drying
Filtering



medite **TFB 35**

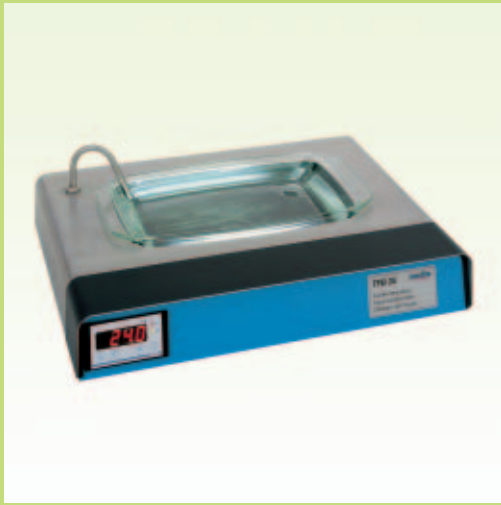

Bagno stendifette

Bagno stendifette per raccogliere e asciugare le sezioni dei campioni istologici, chimici, clinici e batteriologici.

Il bagno stendifette **TFB 35** è di forma rettangolare con una vaschetta in pirex rimovibile.

Il controllo elettronico della temperatura garantisce una perfetta regolazione della medesima e con indicazione su un display digitale.

una superficie in acciaio inossidabile sul piano di lavoro facilita l'asciugatura dei campioni .

La superficie dell'acqua è anti riflesso illuminata dal basso da una lampada a luce fredda.

Dati tecnici:

Dimensioni:

Totali (L/P/H): 430 x 300 x 90 mm

Vaschetta (L/P/H): 270 x 165 x 50 or 80 mm

area asciugatura (L/P): 350 x 75 mm

Temperatura: +30°C to +55°C

Peso: 6,4 kg

Alimentazione elettrica 230V/50Hz/250VA

medite **TFB 45**



Bagno stendifette

Bagno stendifette per raccogliere e asciugare le sezioni dei campioni istologici, chimici, clinici e batteriologici..

Til bagno stendifette **TFB 45** è di forma circolare con un meccanismo perfetto per la regolazione della tempertura. Questo bagno è costruito con una alta qualità di alluminio anodisato. il sistema di protezione in ceramica evita il surriscaldamento dello strumento e il danneggiamento in caso di mancanza di acqua nella vaschetta.

Dati tecnici:

Dimensioni:

Totali: 300 mm Ø, H 80 mm

Ciconferenza vaschetta: 210 mm Ø, H 80 mm

Temperatura: +30°C to +90°C

Peso: 1,7 kg

Alimentazione elettrica: 230V/50Hz/200VA