

TPC 15 Duo/Trio

Processatore Automatico di tessuti



- *Processazione simultanea di tre differenti programmi/ ciclo rapido per le biopsie (meno di un'ora)*
- *Capacità operativa di max. 660 cassette*
- *Ottimo rapporto qualità prezzo*
- *Evita lo sgocciolamento dei reagenti, per un risultato ottimale a basso consumo*

TPC 15 Duo/Trio

Processore automatico di tessuti

Processore lineare a circuito chiuso con 15 stazioni per doppio (TPC 15 Duo) o triplo (TPC 15 Trio) processazione dei campioni a ciclo rapido.

La risposta più efficiente alle necessità di processazione di tutti i laboratori di istologia.

Processazione simultanea di tre differenti programmi di inclusione (o rapido per le biopsie): uno strumento indispensabile per i laboratori che necessitano di risultati in tempi ristretti.

La nuova versione del rinomato TPC 15 Duo/Trio si caratterizza per l'elevata capacità operativa multiprotocollo: con le sue 15 stazioni è in grado di processare due (TPC 15 Duo) o tre (TPC 15 Trio) differenti cestelli contemporaneamente e in totale indipendenza.

Il TPC 15 Duo/Trio è il risultato di anni di studi ingegneristici. Con una capacità massima di 440 cassette (TPC 15 Duo) o capacità massima di 660 cassette (TPC 15 Trio), il TPC 15 Duo/Trio è un multi processatore per grandi routine.

Per la protezione dell'ambiente e dell'operatore, lo strumento si presenta chiuso da coperchio trasparente ed ogni stazione è dotata di coperchio in acciaio inox. Il TPC 15 Duo/Trio include un sistema di estrazione dei fumi con connessione esterna a sistema centralizzato. In aggiunta, è presente un filtro a carboni attivi, il cui stato è monitorato tramite computer.

Riscaldamento e agitatori sono controllati tramite software, per garantire il risparmio energetico. Muovendo i campioni anziché i reagenti, questo potente strumento assicura un'eccellente affidabilità ed una reale multiprocessazione; il consumo dei reagenti si riduce fino al 30% rispetto ai tradizionali processatori a monocamera.

Grazie alle superfici ed ai contenitori in acciaio inossidabile, il TPC 15 Duo/Trio è in grado di lavorare con tutti i reagenti per la processazione, lasciando ampia scelta all'operatore.



Schermo

L'ampio display mostra tutti i dettagli rilevanti per le operazioni di processazione.

Durante la processazione è possibile visualizzare e controllare lo stato di ciascun programma.

La temperatura è regolabile individualmente per ciascuna stazione; il sistema antisurriscaldamento previene ed impedisce la perdita di campioni.

I programmi in corso possono essere interrotti in qualsiasi momento per accedere al cestello ed aggiungere altri campioni.

I programmi possono partire da qualsiasi stazione.

L'alta flessibilità del software permette di impostare programmi brevi, giornalieri, overnight e weekend.




Cestello standard



Cestello a modulo organizzato

TPC 15 Duo/Trio

Processore automatico di tessuti

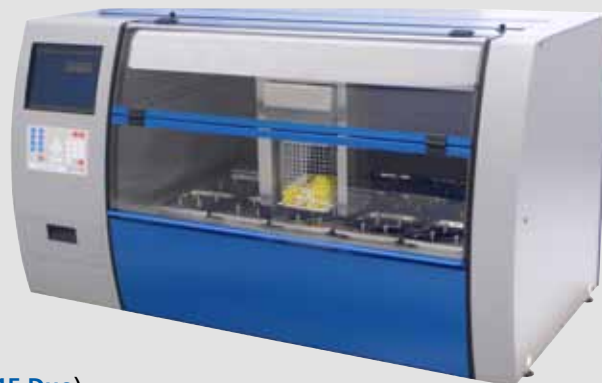


Dati tecnici:

Capacità:	2 x 220 cassette circa (TPC 15 Duo) 3 x 220 cassette circa (TPC 15 Trio)
Capacità delle stazioni:	2,3 litri circa
Operation:	Tempo d'immersione programmabile
Programmazione:	i parametri sono impostabili separatamente per ciascuna stazione Memorizzazione di 18 programmi (15 + 3 per pulizia cestello) Tempo di immersione: da 5 min. a 10 ore Temperatura: da +30°C a +70°C per la paraffina da +30°C a +50°C reagents Vuoto o pressione
Sicurezza:	Batteria a tampone in caso di black out Assorbimento dei fumi tramite filtro a carboni attivi Connessione esterna per impianti centralizzati Ciascuna stazione è chiusa con coperchio in acciaio inossidabile
Dimensioni (L/P/H):	1.290 x 715 x 730 mm
Peso:	140 kg
Alimentazione elettrica:	230 V / 50 Hz / 950 VA

MEDITE è in grado di offrire una vasta scelta di consumabili per il TPC 15 Duo/Trio:

Medite® offre una vasta scelta di cassette per inclusione e biopsia, formelle, paraffina "tissuexwax®", mezzi di montaggio.

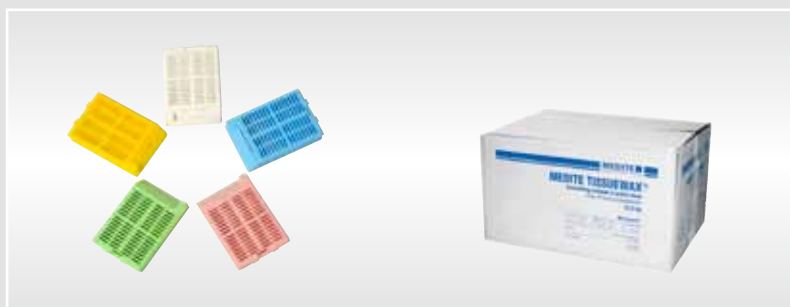

07-2010 / Soggetto a cambiamenti senza preavviso.

MEDITE

Medite S.r.l.

Via dell' Artigianato, 25
37019 Peschiera del Garda (VR)

Tel. +39 045 6401620

Fax +39 045 6409750

info@medite.it

www.medite.it

Made in Germany